

# Eleganza 4

CAMA DE CUIDADOS CRÍTICOS



Solución para cuidados críticos personalizada

# Eleganza 4: Solución personalizada para



# cuidados críticos






# Solución personalizada

Eleganza 4 es una cama posicionable eléctricamente, diseñada especialmente para su uso en cuidados críticos. La plataforma de la cama le ofrece soluciones flexibles y personalizadas para realizar todos los cuidados y cubrir todas las necesidades del paciente, junto con una arquitectura abierta con diferentes funciones técnicas. Puede seleccionar la cama adecuada para cada aplicación médica, cuidado, enfermedad del paciente y presupuesto.



Eleganza 4 Care PROFESSIONAL

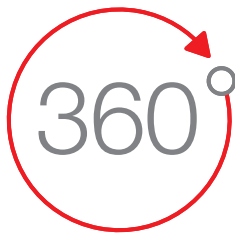

Eleganza 4 Care MOBILITY

UNA CAMA

=

muchas necesidades



Unidad de ictus



Unidad de REA



Cuidados intermedios



Unidad posquirúrgica

Eleganza 4 Care BASIC

cuidados intensivos

Eleganza 4 Care SAFETY



# En cada punto de cuidado

La mayor parte de las tareas y tratamientos en los cuidados críticos se centran en la cabeza y el tórax del paciente. La cama Eleganza 4 ofrece un acceso perfecto a la parte superior del cuerpo del paciente. El diseño único de las barandillas laterales ayuda al personal tanto en las actividades de la atención cotidiana como en situaciones críticas; es precisa, cómoda y ergonómica en todo momento.



## Filosofía de un solo botón

El acceso al panel de control es fácil y su uso muy sencillo. La mayor parte de las funciones de posición y emergencia se configuran pulsando un único botón. El personal de enfermería puede gestionar cualquier situación de un modo rápido, sencillo y seguro.





## Centrada en la parte superior


Los elementos de control están integrados en ambas barandillas laterales superiores para que el cuidador cuente con acceso directo a todas las funciones y opciones de ajuste de la cama. Además, ha sido diseñada con la tecnología SoftDrop, que permite una aproximación al paciente sin limitación alguna. Esta oportunidad optimiza el trabajo altamente ergonómico, ahorra tiempo y evita esfuerzo físico.



## Estrategia de manos libres


La altura de la cama y la posición de reconocimiento pueden ajustarse con el pedal de modo que las manos del personal de enfermería están libres para atender al paciente.

- Fácil de alcanzar
- Fácil de usar

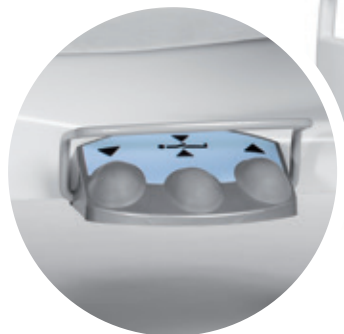

# Mejor seguridad del paciente

La seguridad del paciente es la máxima prioridad. La cama Eleganza 4 está equipada con funciones sofisticadas que protegen al paciente en todas las situaciones diferentes.

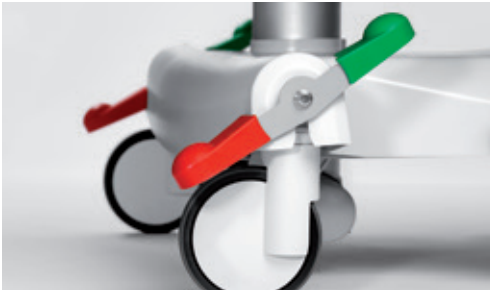


## i-Brake

El freno automático evita las caídas causadas por la inestabilidad de la cama, especialmente al levantarse de la misma.



## Alarma de salida de la cama

El sistema controla el movimiento del paciente en la cama y al levantarse de la misma. Puede configurarse en dos modos en función de las exigencias y la movilidad del paciente.

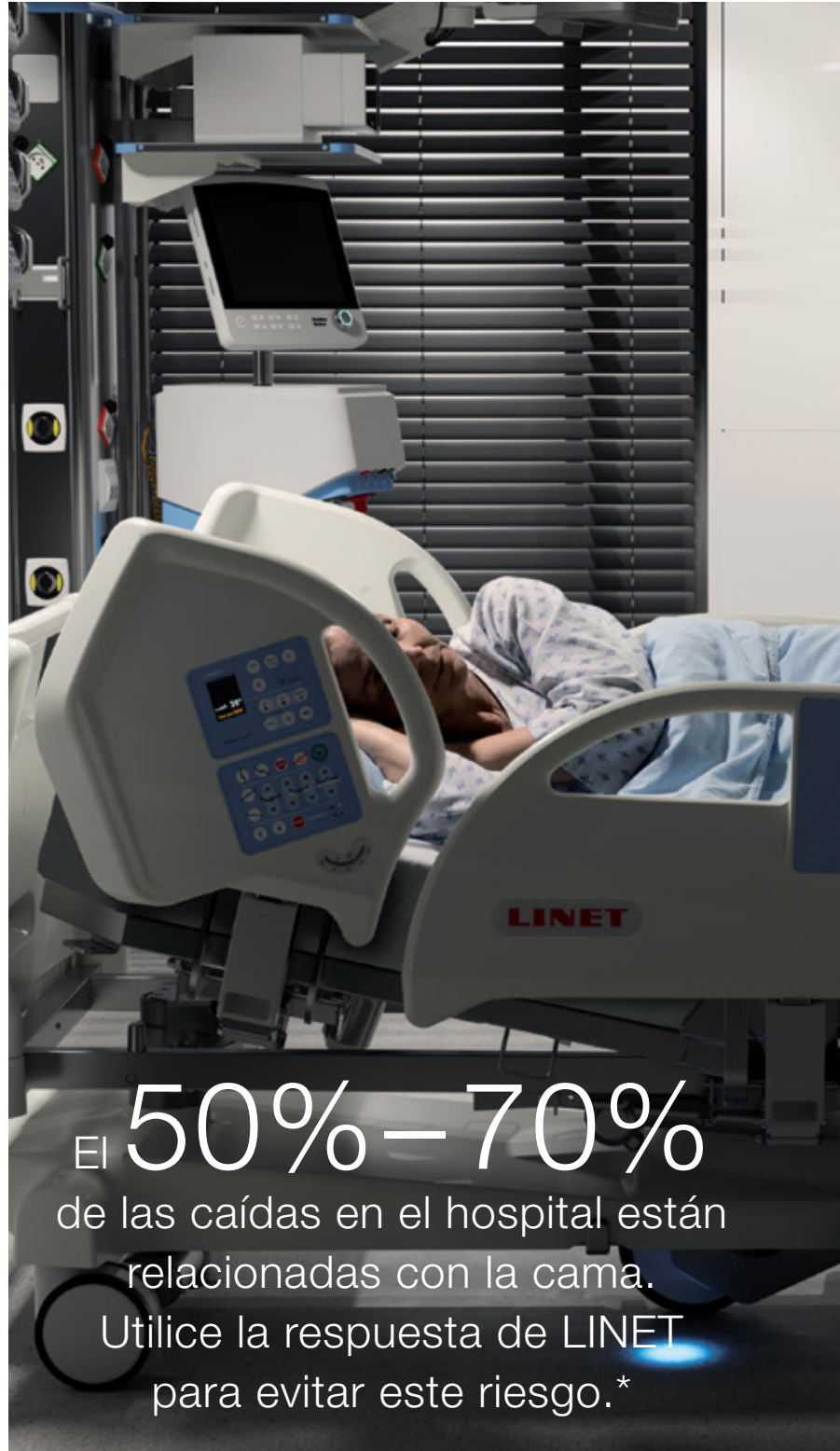

El **50% – 70%**  
de las caídas en el hospital están  
relacionadas con la cama.  
Utilice la respuesta de LINET  
para evitar este riesgo.\*



360° con el paciente  
en mente



## Diseño de barandillas

El diseño y la altura de las barandillas permite satisfacer al máximo las necesidades especiales de cada paciente:

- Riesgo de atrapamiento
- Uso de diferentes sistemas de colchón pasivos y activos
- Prevención de caídas

## Luz nocturna

La función de luz ayuda a la orientación del paciente por la noche y aporta una sensación de seguridad.

## Parada a 30° y 45°

El respaldo se detiene automáticamente con una inclinación de 30 y 45 grados. Además, Ergoframe ofrece una posición cómoda y segura para evitar las úlceras por presión y aportar una ventilación adecuada de los pulmones.

## Safestop

La cama se detiene automáticamente cuando se desplaza a la posición más baja.

## HCE

La cama Eleganza 4 está equipada con tecnología para enviar datos al sistema de información del hospital.

La información seleccionada sobre el estado de la cama y del paciente se encuentra disponible y puede visualizarse en el panel de control y en SafetyMonitor.



# Mejor comodidad del paciente

La cama Eleganza 4 ha sido diseñada para ayudar a mejorar la atención al paciente y los resultados clínicos. Toda la gama de funciones específicas de la cama ayuda al paciente a tener mayor confianza y comodidad.



## Silla cardíaca

Esta posición ayuda a los pacientes que sufren trastornos respiratorios y ayuda a las funciones del aparato cardiovascular. Además, aporta comodidad al paciente para leer y comer.

## Para mayor independencia

El paciente cuenta con acceso inmediato a dos controles independientes para una colocación básica de la cama. Se trata de un control integrado en las barandillas laterales y de un control del paciente aparte que puede colgarse en las barandillas laterales.



## Para un flujo de trabajo optimizado

### Básculas integradas

Las básculas integradas permiten tomar decisiones rápidas y seguras en el punto de atención. La medición del peso del paciente puede realizarse de modo cómodo y sin estrés, ni para el paciente ni para el personal, y sin riesgos adicionales por movimiento del paciente.

### Rayos X

Gracias al lecho radiotransparente y a la estructura especial de la cama, se pueden realizar radiografías pulmonares sin la necesidad de manejar manualmente al paciente.



### i-Drive Power

El sistema de transporte del paciente integrado, controlado y con una 5ª rueda minimiza el esfuerzo del personal al empujar la cama y reduce las lesiones de espalda y otros trastornos musculoesqueléticos que afectan al personal. Se reducen los riesgos en el transporte de la cama del paciente para garantizar máxima seguridad y comodidad.





# Tratamiento mejorado de las heridas

La amplia gama de colchones pasivos, activos e híbridos de LINET ayuda a cubrir las necesidades individuales de cada paciente para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. Las tecnologías innovadoras ayudan a obtener mejores resultados en el punto de atención con recomendaciones basadas en las pruebas.



El **90%**  
de las úlceras por presión pueden evitarse\*



360° con el paciente en mente



Eleganza 4 + Virtuoso



Eleganza 4 + Clinicare 100HF



Eleganza 4 + Clinicare 30




Eleganza 4 + Clinicare 20



### Ergoframe

Esta función aumenta la comodidad del paciente y la ergonomía cuando está tumbado en la cama y reduce al mínimo la compresión de la zona pulmonar y abdominal.

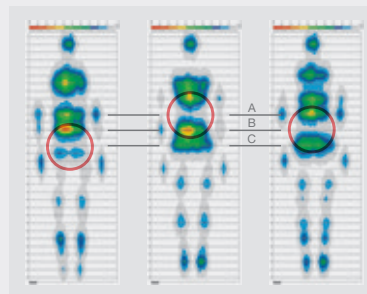


Ciclo de 3 celdas para presión cero (A, B, C)

### Tecnología moderna

Los colchones LINET funcionan con las más avanzadas tecnologías, las cuales utilizan los hallazgos clínicos.

*\* Efecto de presión cero del colchón Virtuoso*

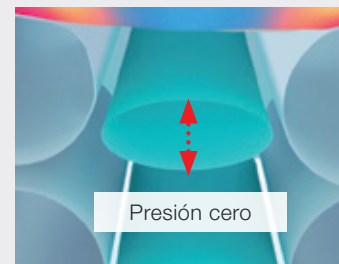

### Presión cero

El colchón Virtuoso con tecnología de 3 celdas ofrece los beneficios de la Presión cero para una prevención máxima y una aplicación y una eliminación regulares de presión para un tratamiento máximo.

# Movilización activa paso a paso

Gracias a sus funciones especiales, la cama Eleganza 4 ayuda con el problema de la movilización, uno de los aspectos cruciales en las unidades de cuidados críticos e intensivos. Una movilización rápida y, lo más importante, segura con participación activa del paciente aumenta la independencia y mejora los resultados.





360° orientada a la demanda

**Paso 1:** el paciente se sienta con la cama en la posición segura más baja usando las barandillas laterales ergonómicas y Mobi-Lift®.



**Paso 2:** el paciente se sienta con los pies en el suelo. La barandilla ergonómica de las barandillas laterales y Mobi-Lift® proporcionan estabilidad y seguridad a los pacientes.



**Paso 3:** gracias al botón de Mobi-Lift®, el paciente puede ajustar la altura de la cama de modo independiente, lo que le ayudará a ponerse de pie suavemente. El personal de enfermería puede ayudar con menos esfuerzo.



## Barandilla lateral Mobi-Lift®

Mobi-Lift® es una característica única de las camas LINET. Se utiliza para ofrecer un apoyo firme al paciente al sentarse y levantarse de la cama. Utilizando el botón arriba o abajo, el paciente puede ajustar la cama para levantarse por sí mismo y fácilmente.



## CLÍNICA

De media, se pierde entre un 2 y un 3% de masa muscular en los 10 primeros días\*. Ofrece apoyo adecuado a los pacientes para una movilización rápida.

## Posicionamiento



Trendelenburg



Anti-Trendelenburg



Posición vascular



Ergo frame con respaldo a 30°



Posición más baja



Posición de tratamiento



Posición cardíaca



Parada de respaldo a 30°

\* Davis, K. G., & Kotowski, S. E. (2015). Prevalence of Musculoskeletal Disorders for Nurses in Hospitals, Long-Term Care Facilities, and Home Health Care: A Comprehensive Review. *Human Factors*, 57(5), 754–792. <https://doi.org/10.1177/0018720815581933>

# Soluciones que crecen con sus

## Una plataforma. Numerosas soluciones.

Cada inversión en el hospital debe ser rentable de diferentes formas: mejorar los resultados, agilizar el flujo de trabajo, mejorar la atención al paciente y reducir costes.

La plataforma de cama completa de la Eleganza 4 le permite personalizar la cama de modo que se ajuste a las necesidades específicas de cada zona de cuidados críticos. Las diferentes funciones de la arquitectura abierta de la cama Eleganza 4 puede cubrir las necesidades de su exigente entorno clínico y de control de costes.



Unidad posquirúrgica



Cuidados intermedios



Unidad de ictus



Unidad de REA

Eleganza 4 – Cama de cuidados críticos para diferentes requisitos

### Eleganza 4 Care BASIC



Su elección:

- Diferentes opciones de panel
- Bandeja integrada para ropa de cama
- Mobi-Lift®

### Eleganza 4 Care SAFETY



Su elección y preocupación por la seguridad:

- Luz nocturna
- Alarma de i-Brake
- Alarma de salida de la cama

### Eleganza 4 Care MOBILITY



Su elección y preocupación por la movilidad:

- i-Brake
- Pedales
- 5ª rueda
- Equipada con HCE

### Eleganza 4 Care PROFESSIONAL



Su elección con un enfoque adicional en una cama de cuidados intensivos equipada profesionalmente:

- 5ª rueda con i-Drive Power
- Cubierta del chasis inferior
- Soporte para placas de rayos X integrado
- Equipada con HCE y SafetyMonitor

¡Seleccione las opciones adecuadas para las necesidades concretas de sus pacientes!

# necesidades



## Servicio

El concepto modular de la cama aporta una serie de beneficios económicos.

El concepto de plataforma única consiste en las mismas piezas de repuesto, por lo que es un servicio más efectivo y económico.

- Mismas piezas de repuesto para todos los modelos
- Respuesta rápida en caso de fallo
- Servicio en cualquier parte del mundo



## Contratos de servicio

LINET ofrece un mantenimiento periódico y un servicio de calidad en diferentes tipos de contratos. El contrato de servicio garantiza un rendimiento de la cama y del colchón al 100%.



## Formación

- Instalación y formación al personal profesional para un funcionamiento y uso correctos de las funciones
- Talleres y cursos de formación profesional
- Técnicos autorizados y con experiencia que reciben formación periódica
- Posibilidad de formación directamente en su hospital



## Cama fácil de limpiar

La construcción de la columna y las superficies planas y sin juntas, así como las piezas de plástico extraíbles, permiten una desinfección y limpieza completas y sencillas.







# Flexibilidad

## Opciones de panel



## Opciones de chasis

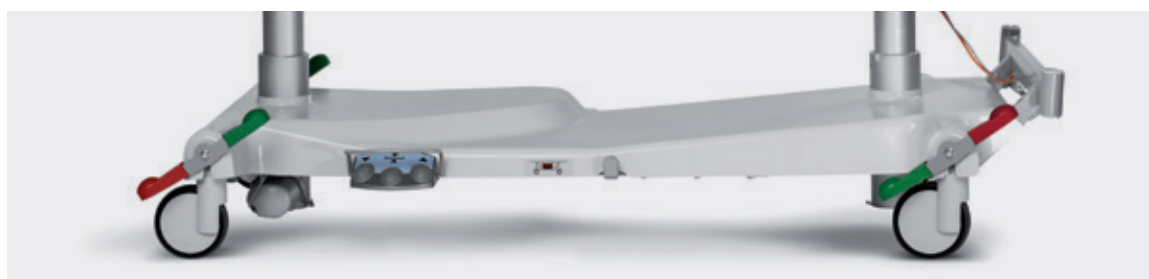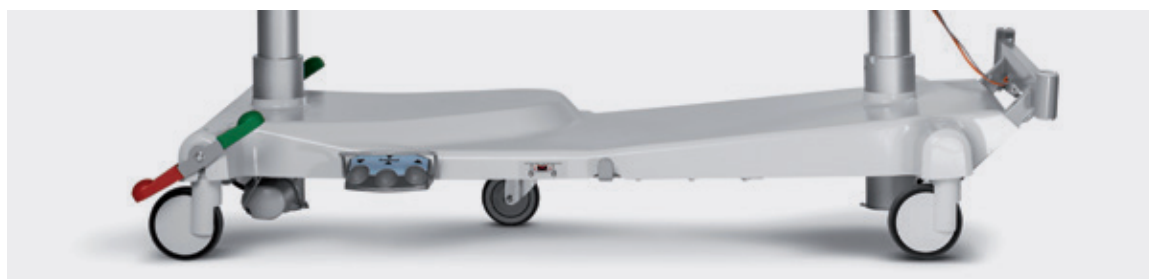



### Certificados

LINET es una empresa que cuenta con certificados de acuerdo con las normas y los sistemas de calidad europeos: EN ISO 9001, EN ISO 13485.

Los productos se fabrican según las normas europeas correspondientes a la tecnología médica y las camas hospitalarias:

EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/CEE, 2014/31/EU, 2011/65/UE.

### Parámetros eléctricos

Fuente de alimentación	230V AC, 50/60 Hz
Entrada máxima	370 VA
Protección contra agua y polvo	IP X4
Tipo de protección frente a la corriente eléctrica	Clase I
Grado de protección frente a lesiones por la corriente eléctrica	Componente aplicado de tipo B
Modo de funcionamiento del motor eléctrico (factor de carga)	máx. 2 min ON/18 min OFF

### Parámetros técnicos

Dimensiones externas	217,5x100 cm
Extensión de la cama	0-22 cm
Dimensiones del colchón	208 x 90 cm
Altura de las barandillas sobre la plataforma del colchón	45 cm
Ajuste de la altura	41-79 cm
Inclinación TR/ATR	14°/14°
Ángulo del respaldo	65°
Ángulo del reposapiernas	25°
Carga máx de seguridad (SWL)	250 kg
Peso máximo del paciente	185 kg

# Eleganza 4

Paciente

- Mayor seguridad y comodidad y mejor atención al paciente
- Concentración en los cuidados y la movilización activa
- Prevención de las úlceras por presión



- Ayuda a mejorar el resultado clínico del paciente
- Simplifica las actividades de enfermería cotidianas
- Manipulación más sencilla gracias a los elementos de control integrados en las barandillas laterales superiores



Personal

Administración

- Solución personalizada para cuidados críticos
- Solución sostenible que crece con sus necesidades
- La oferta compleja de LINET incluye servicios avanzados y formación



Members of LINET Group

## LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid

Tel.: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72 | email: [linetiberia@linet.es](mailto:linetiberia@linet.es) | [www.linet.es/es/](http://www.linet.es/es/)

